



## QUANTIFERON® et TB SPOT®

### Biologistes référents :

Florence JACOMET ☎ 05.49.44.34.37

Anne BARRA ☎ 05.49.44.34.36

J.M GOMBERT ☎ 05.49.44.34.28

Secrétariat ☎ 05.49.44.37.46

### Contexte clinique :

Le test est remboursé par l'assurance maladie dans les indications suivantes :


- Bilan avant la mise en route d'un traitement par anti-TNF alpha
- Patients infectés par le VIH (dépistage systématique dans la cadre d'un bilan initial à la recherche d'une tuberculose latente)
- Recherche d'une tuberculose latente chez un migrant < 15 ans provenant d'un pays à forte endémie tuberculeuse
- Suspicion de tuberculose extra-pulmonaire (précisez la localisation) :
- Suspicion de tuberculose paucibacillaire en cas de diagnostic difficile chez l'enfant
- En cas d'exposition documentée à un cas index: enquête autour d'un cas index, uniquement chez les adultes (de plus de 15 ans)

Indications médicalement justifiées non prise en charge par l'assurance maladie :

- A l'embauche de personnel professionnellement exposé
- I D R > 15 mm
- Suspicion d'une tuberculose pulmonaire de forme non classique
- Traitement immunosuppresseur autre que anti-TNF alpha
- Bilan pré-greffe

Autre indication

Antécédents de tuberculose :  Non  Oui  Pas d'information

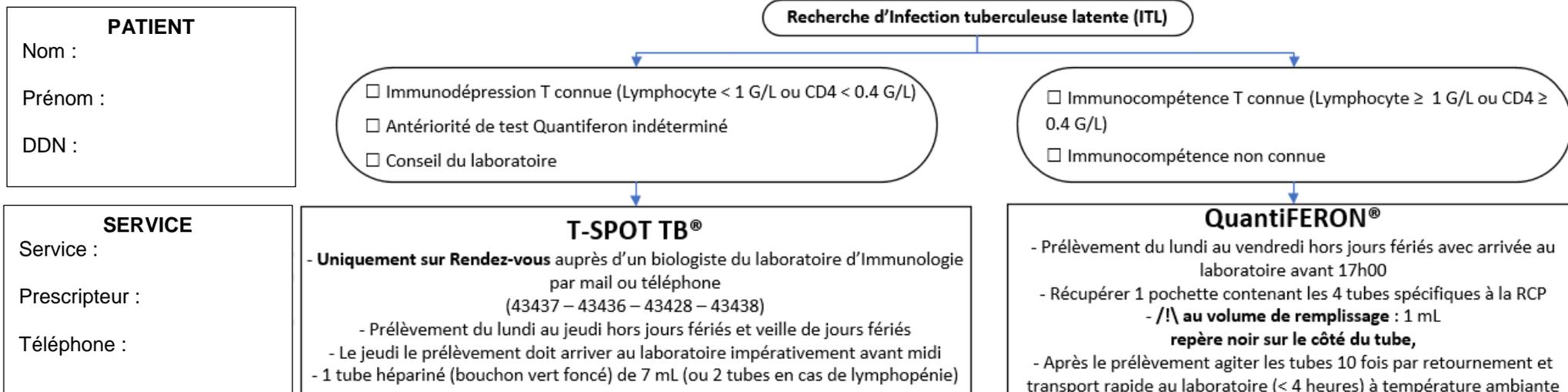



*Instructions pour le prélèvement de tubes Quantiferon® (poste 46502)*

- Utiliser les **tubes spécifiques** pour ce test (à se procurer auprès de la RCP du CHU de Poitiers) et prélever pour chaque patient 1 tube à bouchon gris (noté Nil), 1 tube à bouchon vert (noté TB1) 1 tube à bouchon jaune (noté TB2) et 1 tube à bouchon violet (noté Mitogen)
- **Vérifier la date de péremption** notée sur l'étiquette des tubes
- Si utilisation d'un système de prélèvement à ailettes, commencer par un tube de purge,
- Prélever les 4 tubes sans tenir compte de la couleur du tube pour l'ordre de prélèvement,
- Les tubes sont destinés à ne contenir que **1ml** de sang : Il est donc normal que le sang s'écoule lentement

**Coller l'étiquette patient sur l'étiquette du tube**, de façon à ce que le niveau soit visible.

Coller l'étiquette le plus haut possible pour ne pas masquer le numéro de lot.

**Niveau optimum de remplissage des tubes (environ 1mL)**



**Numéro de lot**

- La ligne noire indiquée sur le côté du tube correspond à la quantité de 1ml. Veillez à ce que le tube soit correctement rempli. Si ce n'est pas le cas, il faut prélever un nouvel échantillon de sang
- Après prélèvement, agiter les tubes par retournement (x10). Conserver à **température ambiante** avant envoi rapide au laboratoire.

**APRES LE PRELEVEMENT, REMETTRE LES TUBES DANS LA POCLETTE  
AVEC LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES REMPLIE**